



美歯口LED55 (セルフホワイトニング用LED)

取扱説明書 Rev2.1



商品特長とスペック

美歯口LED55 基本性能

特徴



1. 11つのハイパワー青色LEDライトを使用。オリジナル設計モデル
2. 高い安全性と人間工学に基づいたスタイリッシュなデザイン
2. 青色LEDの光が口の中全体に当たるほか、発熱がほとんどないため歯髄炎や知覚過敏を起こしにくい。
3. 使いやすい全方向回転可能なアーム設計により自由に角度調整が可能
5. マイクロプロセッサ制御タイマーのプリセットでホワイトニング時間の調整が可能
6. 安全な ヒューズを使用しているため、過電流の場合、即時切断
7. LEDがAグループ、Bグループ選択可能で光力の調整が可能

| スペック

フレームの寸法	高さ1420mm	アームの長さ1250mm(最長)	幅630mm
重量	19.5kg		
電圧	AC100-240V	50/60Hz	
電力	55W		
ブルーライトの波長	460-490 n m		
ブルーライトの濃度	200-300mw/cm ²		




製品の構造と部位名称

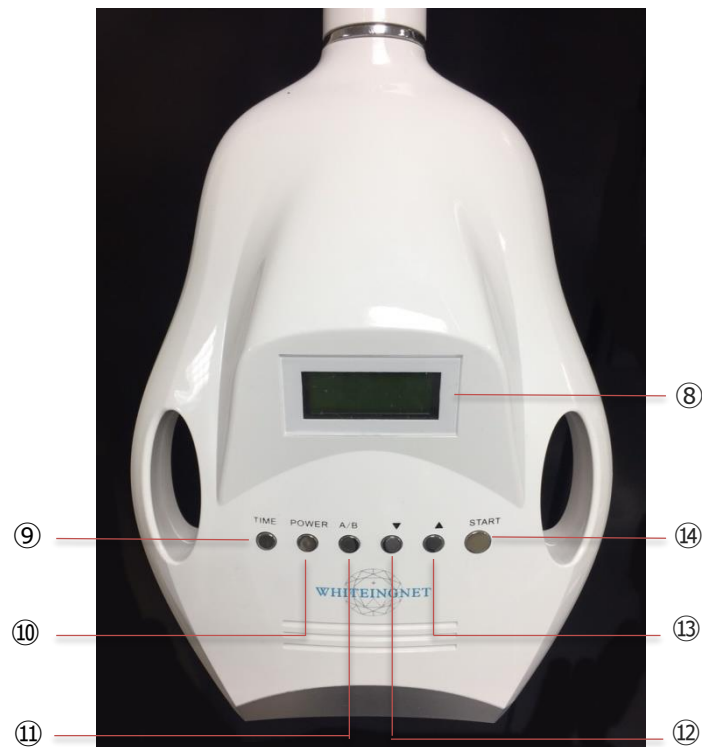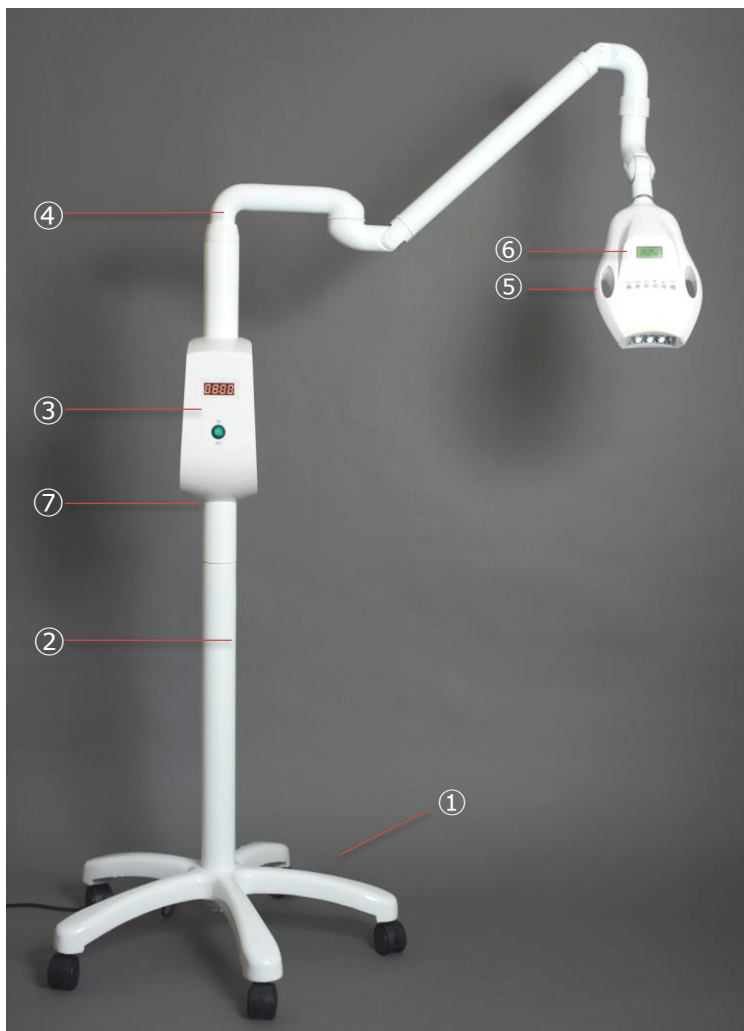


■ 名称

- ①脚
- ②支柱
- ③パワーボックス
- ④回転アーム
- ⑤ハンドル
- ⑥メインフレーム
- ⑦電源コード
- ⑧スクリーン
- ⑨時間ボタン
- ⑩出力設定ボタン
- ⑪A/Bグループボタン
- ⑫ダウンボタン
- ⑬アップボタン
- ⑭スタート/ストップボタン
- ⑮LEDライト8球
- ⑯LEDライト3球

組み立て方法

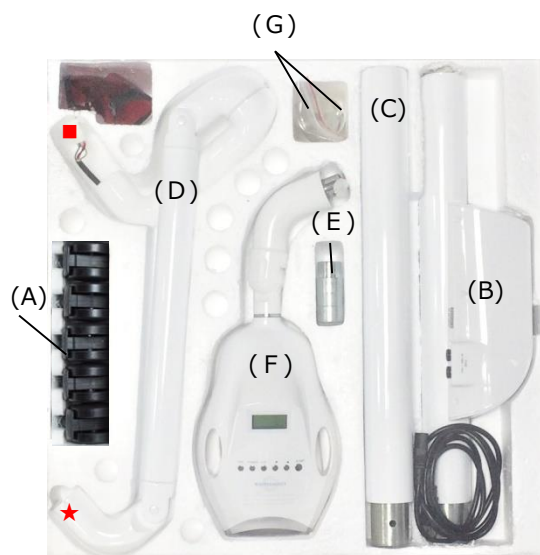

(H)小スパナ 	(J)固定金具 	(L)ドライバー 	(M)ねじ 	(O)交換用ヒューズ  ※保管用
(I)大スパナ 	(K)ボルト 	(N)ねじ 	(P)変換プラグ 	

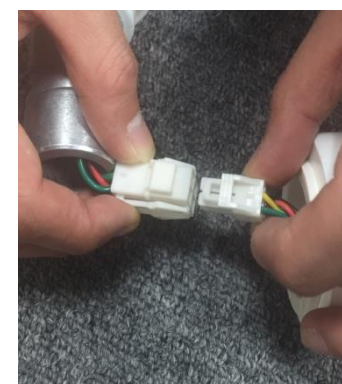

組み立て方(続き)



⑦支柱(C)の筒穴に回転アーム(D)をしっかりと奥まではめ込み、固定します。



⑧回転アーム(D)の★部に(G)のカバーをはめ込みます。 ※円筒型の方です。



⑨回転アーム(D)★とヘッド(F)のソケットをつなぎます。(＋は＋どうし、－は－どうしてつなぎます。)



⑩ドライバー(L)でねじ(N)を締めます。



⑪支柱(B)と支柱(C)をつなぎ、ドライバー(L)でねじ(M)を留めます。



⑫支柱(B) 背面の接続タ口にACアダプターケーブルを接続します。





⑭コンセント変換器(P)をつけて完成。

マシンの使い方



①電源の入れ方


電源プラグを差し込み、パワーボックスの電源スイッチをいれます。同時に、スクリーンが点灯いたします。

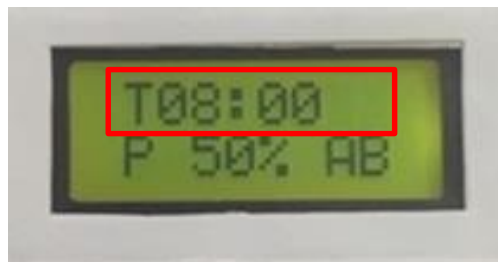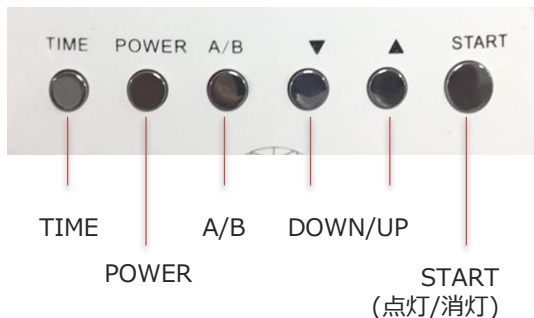

②ホワイトニング時間の設定


“TIME”（タイム）ボタンを押すと、TIMEが点滅しますので、アップボタンやダウンボタンを使って時間をあわせることができます。必要なホワイトニング時間を設定し、希望の時間が表示されたらTIMEボタンを再度押すと設定が完了します。

ライトの照射は基本的に8分間/1照射(※最大でも10分間)での設定をお願いいたします。

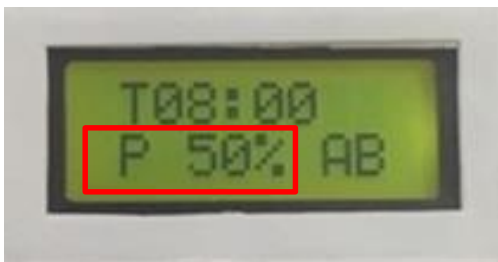

③光量の設定

“POWER”ボタンを押すと、出力の表示が点滅しますので、アップボタンやダウンボタンを使って、希望の出力に合わせてください。一回押すごとに10%の増減があります。出力電力の幅は40%～100%です。**出力は基本的に50%(最大でも70%)の設定にてご使用ください。**

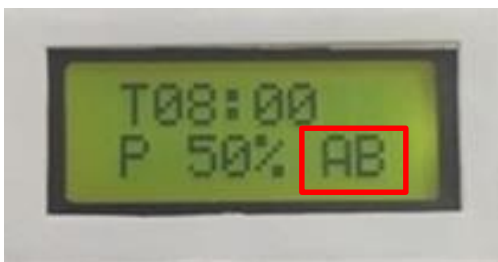

④LEDの点灯グループ設定

A/Bボタンを押すと、LEDグループ選択が点滅しますので、アップボタンやダウンボタンを使って変更が可能です。“A”は上下段8個のLED、“B”はその間の3つのLEDを指します。“AB”は計11個のLEDを表します。再度A/Bボタンを押すと設定が完了します。

基本的には“AB”の設定にてご使用ください。

| 安全自動停止

本マシンには温度保護装置が内蔵されており、LEDライトの温度が60度を越えると、本システムは自動的に電源が切れます。

安全上の注意

- ① LEDブルーライトを直接人の目に当てないでください。目に深刻なダメージを与えます。
本システムを利用する際は、スタッフ様もご利用者様も目を保護するゴーグルを着用してください。
また長期間使用されない際は、念のため本体の電源コンセントを切り、誤操作による点灯が無い様にご注意ください。
- ② 本マシーンを移動したりする際は、片方の手で機械を支え、垂直の支柱をもう片方の手で支えます。
そして、取付用金具をゆっくり引出し、設置場所を調整します。
本マシーンの転倒と、脚が動くのを防いでください。施術前は必ず殺菌処理してください。
- ③ 使用後は、電源を切って保管ください。
万が一、使用中に問題があった際に、当社発行免許なしの業者で修理した場合は、その後の保証は致しかねます。
- ④ 製品の安全を確保するために、移動させるときは細心の注意を払ってください。
本マシーンの上に重いものを置いたり、本マシーンが入った箱を5個以上積み重ねないでください。
また、液体等が箱の中に入らないようにしてください。
- ⑤ 本マシーンは、気温10℃～40℃のところで保存してください。
また、換気をしっかりしてください。湿度は30%～80%の屋内に保存してください。
- ⑥ 本マシーンの設置場所は、太陽光の直射日光が当たらない場所へ設置をお願いします。
また、水廻りなど水分がかかってしまう可能性が考えられる場所への設置もお控えください。



修理保証・規定

本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。弊社のアフターサービスを提供させて頂くため、以下の事項について説明申し上げます。

①無料保証期間はご購入日より2年間です。無料保証期間中、異常があれば弊社や認定業者にお問い合わせください。

A 本マニュアルで提示された用途以外に使用した場合。

B 本マニュアルで提示された使用方法に従わない場合。

C 本マシーンを解体した場合。

D 弊社、または認定業者以外が部品を交換、修理した場合。

③運送や、組み立てる際の外部衝撃を受け、故障した場合、

④天変地異等の不可抗力における災害（火災・洪水・地震・雷・ガス爆発など）

万が一運送途中の衝撃などの原因で故障した場合は下記の修理保証書に記入し、弊社若しくは、代理店にご連絡ください。

修理保証書

型番： 製造番号： 購入日： 年 月 日

社名（氏名）：

住所：

TEL:

FAX :

社名：株式会社シャリオン

住所：東京都港区海岸2-6-31 日建ビル6階

TEL : 03-6459-4566

FAX : 03-6435-2027

